

# Ochranné oděvy proti rentgenovému záření pro pacienty a zdravotnický personál ve stomatologii



## Límce pro pacienty k intraorálnímu rentgenu

Límce jsou vyráběny z lehkého vícevrstvého stínícího materiálu s ekvivalentem 0,3 nebo 0,5 mm Pb. Límce chrání štítnou žlázu a aby bylo stínění účinné, musí límce dobře přiléhat ke krku.

Vyrábějí se ve třech velikostech: děti, mládež-dospělé osoby, dospělé osoby silnější postavy.

Vyrábí se v různých barevných odstínech, upínání na suchý zip.

velikost - cena s dph 5%

S 336,- Kč

M 462,- Kč

L 525,- Kč




## Zástěry pro pacienty k intraorálnímu rentgenu

Zástěry jsou vyráběny z lehkého vícevrstvého stínícího materiálu s ekvivalentem 0,3 mm Pb (požadavek v ČR min 0,25 mm Pb) nebo 0,5 mm Pb (požadavek obvyklý v zemích EU)

Vyrábějí se ve dvou velikostech: děti a dospělé.

Povrchový materiál nylon v různých barevných odstínech stejných jako límce, upínání na suchý zip.

velikost - cena s dph 5%

dětská 

dospělá 3381,- Kč



## Zástěry pro pacienty k panoramatickému rentgenu

Zástěry se vyrábějí ze stejného materiálu jako zástěry k IO rentgenu, ale mají jiný střih neboť musí krýt i záda.

Vyrábějí se ve dvou velikostech: děti a dospělé.


Povrchový materiál nylon v různých barevných odstínech, upínání na suchý zip.

velikost - cena s dph 5%

dětská 

dospělá 

Poznámka: Límec se u panoramatických snímků nepoužívá, štítná žláza je chráněna páteří, svazek rentgenového záření vstupuje do pacienta převážně zezadu.

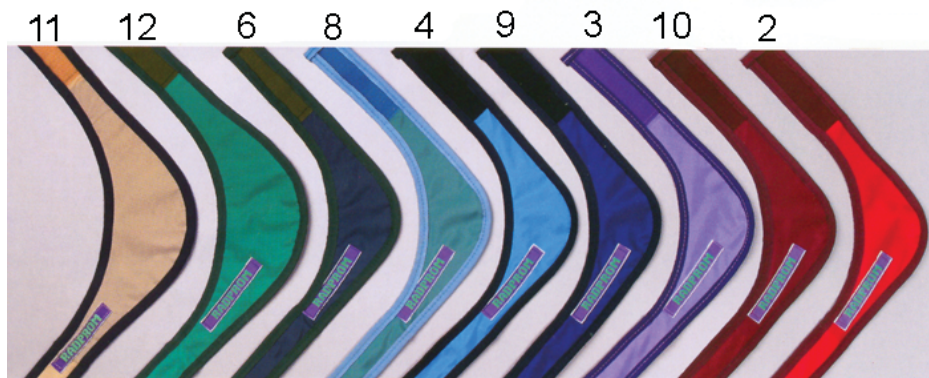

Zde si podle čísla můžete vybrat barvu, která bude na Vaší vestě nebo límci.